



# SANOSIL

DISINFECTANTS FOR LIFE 



# SanoClean AR

Limpiador desinfectante listo para usar

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)

# SanoClean AR

Limpiador desinfectante  
listo para usar



## ... con efecto depósito

Ideal para superficies en el ámbito médico y  
la gestión de instalaciones

- ✔ Limpieza y desinfección en una sola pasada
- ✔ Efecto óptimo contra bacterias, virus (con envoltura), levaduras y hongos
- ✔ Aplicación sencilla y segura (listo para usar)
- ✔ No deja restos pegajosos en las superficies
- ✔ No provoca olores molestos
- ✔ No contiene alcoholes, cloro/compuestos de cloro, ni compuestos de amonio cuaternario (QAV)
- ✔ Contiene peróxido de hidrógeno reforzado catalíticamente
- ✔ El peróxido de hidrógeno se descompone al 100 % en agua y oxígeno
- ✔ Conservación estable en almacenamiento durante más de 2 años
- ✔ Un producto de calidad fabricado en Suiza



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

**SANOSIL AG** • CH-8634 Hombrechtikon • Suiza  
E-mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com)  
[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El limpiador desinfectante SanoClean AR se emplea para la limpieza y desinfección combinada en una sola pasada. Una mezcla de tensioactivos combinados entre sí logran de forma conjunta con los componentes de desinfección, por un lado, una excelente capacidad de eliminación de la suciedad y, por otro, una acción desinfectante exhaustiva con efecto depósito.

La sustancia activa utilizada es el peróxido de hidrógeno, el cual se estabiliza adicionalmente y ve multiplicada su acción desinfectante con la adición de una cantidad mínima de iones de plata a modo de catalizador. **Este procedimiento permite incrementar el efecto desinfectante hasta en un 800 %.**

Además, tras la aplicación, el peróxido de hidrógeno se descompone en su totalidad en agua y oxígeno. Los mínimos restos de plata que permanecen sobre la superficie tras la descomposición del peróxido retrasan la proliferación de los gérmenes durante un período de hasta 72 horas.



## DESINFECCIÓN: INFORMACIÓN ADICIONAL

**Nota 1:** SanoClean AR puede aplicarse en todo tipo de superficies (plástico, acero inoxidable, vidrio, cerámica, piedra, porcelana, acero al cromo-níquel, etc.). Gracias a su óptima capacidad de eliminación de grasa, resulta especialmente apto para superficies de contacto, tales como barandillas, botones, pomos de puerta, pantallas táctiles, etc.

**Nota 2:** Es preferible optar por una desinfección mediante rociado y frotado o bien por su aplicación con una bayeta humedecida que por una simple pulverización del producto. Si se opta únicamente por la pulverización (especialmente con un pulverizador manual), pueden quedar zonas sin tratar, algo que debe evitarse.



SanoClean AR



## RESUMEN

### TIPO DE PRODUCTO

listo para usar

### ADECUADO PARA

Desinfección mediante frotado/  
Sano Wipes

### ACCIÓN CONTRA

bacterias, levaduras, virus  
(influenzavirus A, coronavirus),  
hongos

### PERÍODO DE CONSERVACIÓN


2 años

### COMPOSICIÓN

1,5g/100g peróxido de hidrógeno,  
0,003g/100g plata  
> 0,5% tensioactivos

## Principio de funcionamiento:

- 1 El oxígeno liberado por el peróxido de hidrógeno ( $^1\text{O}_2/\text{O}_2$ ) ataca las membranas celulares de los microorganismos. Estos se desnaturalizan y destruyen por oxidación (combustión en frío).
- 2 Los iones de plata favorecen este efecto reforzando catalíticamente la acción del peróxido. Además, bloquean el metabolismo (donde tenga lugar) y la capacidad de proliferación de los gérmenes.

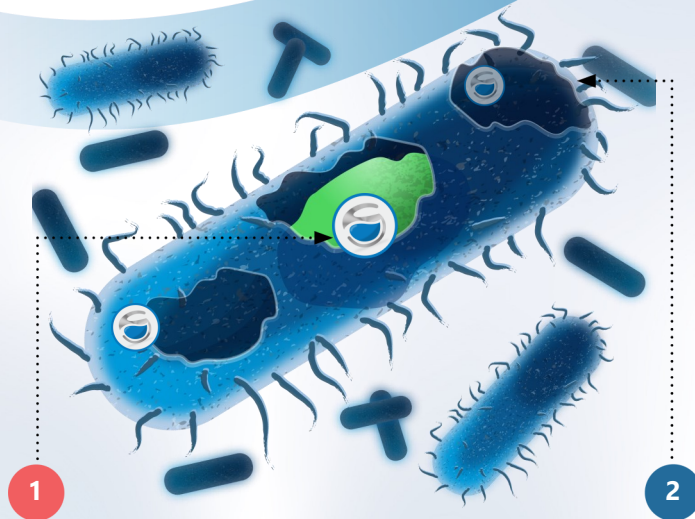

**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Suiza  
E-mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com)

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



# DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

Procedimiento de rociado y frotado

**Nota:** Cuando se trasvase la solución de SanoClean AR a botellas pulverizadoras, u otro tipo de recipientes, deberá adherirse obligatoriamente una etiqueta en el exterior del recipiente con información sobre el contenido. Disponemos de etiquetas adecuadas si lo desea.



## PASO 1

Limpie a fondo la superficie que se deba tratar con un producto de limpieza adecuado. Cuanto más limpia esté la superficie, mayor será el efecto desinfectante.

## PASO 2

Utilice guantes. Humedezca una bayeta con SanoClean AR sin diluir.

**Dosificación en superficies lisas: 30-50 ml/m<sup>2</sup>**




## PASO 3

Humedezca con el paño la superficie que se vaya a tratar dejando una película húmeda uniforme que la cubra por completo. Evitar la formación de charcos. En el caso de que queden gotas o charcos en las superficies lisas, extiéndalos con la bayeta.

## PASO 4

Deje secar el producto.

**Tiempo requerido, aprox. 15 min.**

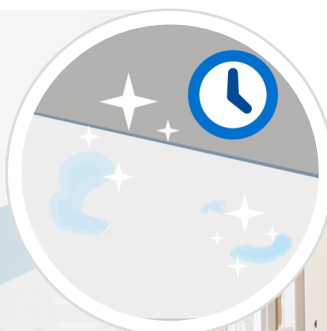

SanoClean AR



## EFICACIA

### NORMAS/TIEMPOS DE ACTUACIÓN

#### BACTERIAS

##### Bactericida:

EN 1276 nivel elevado de contaminación: 5 min

EN 13697 nivel elevado de contaminación: 15 min

#### LEVADURAS

##### Levuricida:

EN1650: nivel elevado de contaminación: 30 min

EN 13697: nivel elevado de contaminación: 5 min

#### HONGOS

##### Fungicida:

EN 1650: nivel elevado de contaminación: 30 min

EN 13697: nivel elevado de contaminación: 30 min

#### VIRUS

##### Virucida: (Influenzavirus A \*)

EN14476:2013+A1:2015:

nivel elevado de contaminación: 30 s

**Con actividad virucida limitada: virus con envoltura \***

EN14476:2019, nivel de contaminación bajo: 1 min.

\*válido también para coronavirus según la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza (BAG)

**Nota:** Cuando se lleve a cabo el rociado directo con un aparato, deberá evitarse en la medida de lo posible la formación de aerosoles. Para aplicaciones en superficies de tamaño superior a las domésticas/de más de 30 minutos al día, deberá utilizarse una mascarilla adecuada para evitar irritaciones en las vías respiratorias.



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Suiza  
E-mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com)

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



# DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

con SanoWipes

Las SanoWipes son toallitas secas contenidas en un práctico cubo expendedor de tapa con cierre. Antes de su utilización, se impregnan de SanoClean AR, quedando listas para su uso durante varias semanas. Las SanoWipes impregnadas resultan ideales para una rápida desinfección intermedia de pequeñas superficies.



## PASO 1

Utilice guantes. (Recomendación básica de seguridad para la manipulación de desinfectantes.)

## PASO 2

Retire la lámina de protección del rollo de toallitas e introdúzcalas en un cubo apropiado.




## PASO 3

Impregne el rollo de SanoClean AR sin diluir.  
**Dosificación 1 – 1,2 l por rollo.**



## PASO 4

Extraiga la primera toallita a través de la abertura expendedor y cierre debidamente la tapa transparente. (Nota: Con el tiempo, las toallitas pueden decolorarse levemente debido a su exposición a la luz, no obstante esto no afecta a su calidad).

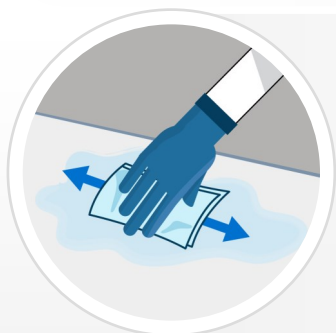

## PASO 5

Tome una toallita SanoWipes impregnada y frote varias veces a fondo la superficie que deba desinfectarse. Utilice guantes para evitar que se reseque la piel debido al potente efecto desengrasante de SanoClean AR.



SanoWipes



## DATOS TÉCN.

### Material

PET — optimizado para la aplicación de líquidos

### Toallitas por rollo

90 ud

### Dimensiones de las toallitas

36 x 20 cm



**Nota:** Tras llenar el cubo de SanoWipes adhiera siempre etiqueta con información sobre el contenido. Disponemos de etiquetas apropiadas si lo desea.



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Suiza  
E-mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com)

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



## DESINFECCIÓN DE SUELOS

con mopa con rociador

**Nota:** Como alternativa a un sistema de mopa con rociador, también resultan adecuados los recambios de mopa prehumectados. En superficies de mayor tamaño (p. ej., colchonetas deportivas), resulta adecuado el uso paralelo de un pulverizador manual potente y una mopa para el frotado posterior.

### PASO 1

Limpie a fondo la superficie que se deba tratar con una mopa y un producto de limpieza adecuado.

### PASO 2

Añada SanoClean AR en el depósito de un aparato de aplicación con mopa adecuado.


### PASO 3

Humedezca la superficie con el aplicador dejando una película uniforme de producto capaz de secarse en unos pocos minutos. Deje actuar/secar el producto.



## DESINFECCIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS

(empaquetaduras, juntas tóricas etc.)

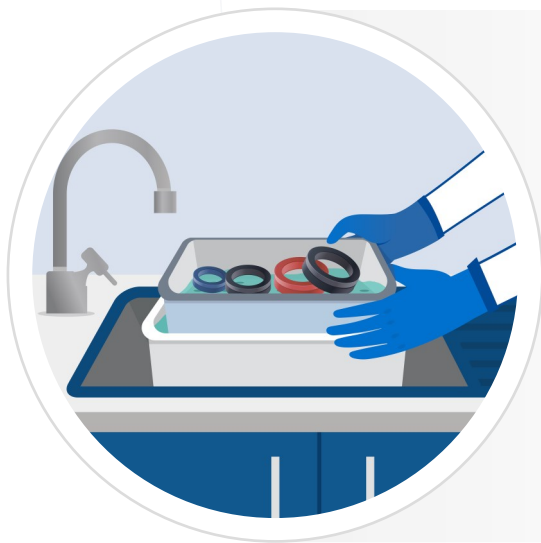

### PASO 1

Si es posible, lave las piezas que se deban tratar en un lavavajillas o a mano.

### PASO 2

Añada SanoClean AR en un recipiente e introduzca en él las piezas. Extráigalas al cabo de unos minutos y séquelas. Mientras el SanoClean AR no presente restos de suciedad, la solución podrá utilizarse varias veces.

### Utilizar los biocidas de forma segura. Leer siempre el etiquetado y la información del producto antes de utilizarlo.

Nuestras indicaciones de aplicación técnica transmitidas tanto de forma oral como escrita se basan en ensayos de amplio alcance. Nuestras recomendaciones se basan en los conocimientos disponibles, si bien no son vinculantes, dado que tanto la aplicación como el almacenamiento quedan fuera de nuestro alcance directo. Las descripciones de producto o la información relativa a las propiedades de las preparaciones no contienen declaraciones en lo que respecta a responsabilidad ante posibles daños.



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Suiza

E-mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com)

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)





**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

**SANOSIL AG** • CH-8634 Hombrechtikon • Suiza  
E-mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com)  
[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)

